

Type IIR

GOOD FOR DROPLET PRECAUTIONS

- (EN) Intended Use: This product is intended for infection control practices in the Health & Beauty industry. When worn properly, it will help minimize contamination caused by exhaled microorganisms and reduce the risk of contracting disease or infection. Change immediately if contaminated with blood or body fluid. This mask is not a respirator.
Warning: This mask does not protect the wearer to blood and body fluids.
- (DE) Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Dieses Produkt ist zur Anwendung von Schutzmaßnahmen im Gesundheitsbereich vorgesehen. Wenn die Maske ordnungsgemäß getragen wird, hilft es bei der Minimierung von ausgestoßenen Krankheitserregern und verringert für den Tragenden das Potential eines Kontakts mit Blut und Körperflüssigkeiten.
Warnung: Diese Maske eliminiert nicht das Risiko eines Erwerbs von Krankheiten oder Infektionen. Bei Verunreinigungen mit Blut oder Körperflüssigkeiten umgehend austauschen. Diese Maske ist kein Atemschutzgerät.
- (FR) Usage prévu: Ce produit est destiné aux pratiques de contrôle des infections dans l'industrie des soins médicaux. Lorsqu'il est correctement porté, ce produit aidera à minimiser la contamination causée par les microorganismes expirés et réduira l'exposition potentielle de son porteur au sang et autres fluides corporels.
Avertissement: Ce masque n'élimine pas le risque de contracter une maladie ou une infection. Remplacez immédiatement le masque s'il a été contaminé par du sang ou autres fluides corporels. Ce masque n'est pas un masque respiratoire.
- (ES) Uso deseado: Este producto está diseñado para prácticas de control de infecciones en la industria sanitaria. Cuando se usa apropiadamente, ayudará a minimizar la contaminación causada por microorganismos exhalados y reducirá la exposición potencial del portador a la sangre y fluidos corporales.
Advertencia: Esta mascarilla no elimina el riesgo de contraer enfermedad o infección. Cambiar inmediatamente si se contamina con sangre o fluidos corporales. Esta máscara no es un respirador.
- (IT) Destinazione d'uso: Questo prodotto è destinato alle pratiche per il controllo delle infezioni nel settore sanitario. Se indossate correttamente, aiutano a ridurre la contaminazione causata dall'inhalazione di microorganismi e riduce l'esposizione potenziale a sangue e fluidi corporei.
Attenzione: Questa maschera non elimina il rischio di contrarre malattia o infezioni. Cambiarla immediatamente se contaminata con sangue o fluidi corporei. Questa maschera non è un respiratore.
- (NL) Beoield gebruik: Dit product is bedoeld om infecties te vermijden in de gezondheidszorg. Als het correct wordt gedragen, helpt het de besmetting door uitgaande micro-organismen tot een minimum te beperken en vermindert het de mogelijke blootstelling van de draager aan bloed en lichaamsvloeistoffen.
Waarschuwing: Dit masker is niet alle risico's op besmetting met een ziekte of infectie. Vervang het masker onmiddellijk als het met bloed of lichaamsvocht in aanraking is gekomen. Dit masker is geen



PROCEDURE FACE MASK

WITH EAR LOOPS

Effective, Comfortable, Reliable



LATEX
FREE

NICKEL
FREE

CADMIUM
FREE

Soft, Easy to Breathe, Full Width, Flexible

- ⓔⓃ Procedure Face Mask, Blue, EarLoops, Latex Free
- ⓓⓔ Verfahrens-Gesichtsmaske, Blau, Ohrschlaufe, Latexfrei
- ⓕⓗ Masque faciale Procédure Chirurgicale, Couleur Bleue, Boucles de Fixation aux Oreilles, Sans Latex
- ⓔⓢ Mascarilla de Procedimiento, Azul, Gancho, Sin Látex
- ⓔⓣ Mascherina per Procedure, Blu, Elastici Auricolari, Priva di Lattice
- ⓃⓁ Gezichtsmasker Voor Ingrepen, Blauw, Oorbandjes, Zonder Latex

Three Layers
Integrated Nose Bridge
Filtration Efficiency Exceeds 98%
Meets Type IIR Standards

Box of 50



**PROCEDURE FACE MASK
WITH EAR LOOPS**



PROCEDURE FACE MASK

WITH EAR LOOPS

Effective, Comfortable, Reliable

LATEX
FREE

NICKEL
FREE

CADMIUM
FREE

Box of 50

TECHNICAL DATA SHEET

Omnitex Type IIR Earloop Procedure Face Mask


Intended Use

Procedure masks are intended to be worn by personnel during medical procedures to protect both the patient and the operating personnel from transfer of microorganisms, body fluids and particulate material transfer. Latex free.

Analysis		
Characteristic	Testing Methodology	Acceptable Limits
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	ASTM F2101	BFE @ 3.0 μm large Bacteria $\geq 98\%$
Differential Pressure (ΔP)	MIL-M-36954C	$\Delta P < 5.0$ mm of $\text{H}_2\text{O}/\text{cm}^2$
Particulate Filtration Efficiency (PFE)	ASTM F2299	PFE @ 0.1 μm large Latex particules $\geq 98\%$
Fluid Resistance	ASTM F1862	Resistant @ 160mmHg
Textile Flammability	16 CFR 1610	Class I flame spread

Characteristic	Specification		
Materials	Mask Body	Outer Material	Spunbond Polypropylene (SBPP)
		Filter Layer	Melt Blown Polypropylene (MBPP)
		Inner Material	Spunbond Polypropylene (SBPP)
	Nose-piece	Plastic Covered Iron	
	Earloop	Polyester and Spandex	
Description	Pleated rectangular face masks with a shapeable nosepiece and two earloops present, one on each side, in order to hold mask in place.		
Standards	EN 14683:2014		
Packaging	Markings	CE Mark, Latex Free, Pack Size, Barcode	
		Product Ref, LOT number, Expiry, Manufacturer	
	Storage	Store under cool, clean, and dry conditions. Avoid excessive heat - over 40degree celsius	
	Product Code	MK-OX-50BL	
	Pack & Carton Configuration	50 pieces per box, 40 boxes per carton	

Visual

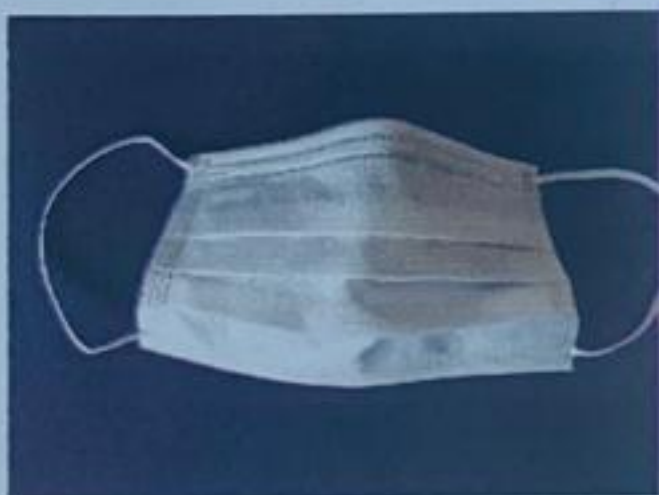





STORE IN COOL DRY PLACE



0 635131 900990

REF

MK-OX-50RL

LOT

200264



05 / 2023



Omnitex is a Registered Trademark of Sharon Services
Unit 69, Carntyne Industrial Estate, Glasgow G32 6A
sales@sharonservices.co.uk

TECHNICAL DATA SHEET

Omnitex Type IIR Earloop Procedure Face Mask

Intended Use

Procedure masks are intended to be worn by personnel during medical procedures to protect both the patient and the operating personnel from transfer of microorganisms, body fluids and particulate material transfer. Latex free.

Analysis		
Characteristic	Testing Methodology	Acceptable Limits & Results
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	EN 14683:2019 Ann. B	Required: $\geq 98\%$ Result: 98.5% - 99%
Differential Pressure (ΔP)	EN 14683:2019 Ann. C	Required: $<60 \text{ Pa/cm}^2$ Result: 25.3 Pa/cm ²
Microbial Cleanliness	EN 14683:2019 Ann. D	Required: $\leq 30 \text{ CFU/g}$ Result: 12.4 CFU/g
Fluid Resistance	ISO 22609:2004	Required: resistant at 120mmHg Result: Passed

Characteristic	Specification		
Materials	Mask Body	Outer Material	Spunbond Polypropylene (SBPP)
		Filter Layer	Melt Blown Polypropylene (MBPP)
		Inner Material	Spunbond Polypropylene (SBPP)
	Nose-piece	Plastic Covered Iron	
	Earloop	Polyester and Spandex	
Description	Pleated rectangular face masks with a shapeable nosepiece and two earloops present, one on each side, in order to hold mask in place.		
Standards	EN 14683:2019		
Packaging	Markings	CE Mark, Latex Free, Pack Size, Barcode	
		Product Ref, LOT number, Expiry, Manufacturer	
	Storage	Store under cool, clean, and dry conditions. Avoid excessive heat - over 40degree celsius	
	Product Code	MK-OX-50RL	
	Pack & Carton Configuration	50 pieces per box, 40 boxes per carton	

Visual





PROCEDURE FACE MASK

WITH EAR LOOPS

Effective, Comfortable, Reliable

LATEX
FREE

NICKEL
FREE

CADMIUM
FREE

Box of 50



PROCEDURE FACE MASK

WITH EAR LOOPS

Effective, Comfortable, Reliable



LATEX
FREE

NICKEL
FREE

CADMIUM
FREE

Type IIR

GOOD FOR DROPLET PRECAUTIONS

- (EN) Intended for use in the Health & Beauty industry. When worn properly, it will help minimize contamination caused by exhaled microorganisms and reduce the risk of infection. Change immediately if contaminated with blood or body fluid. This mask is not a respirator.
- (DE) Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Dieses Produkt ist zur Anwendung von Schutzmaßnahmen im Gesundheitsbereich vorgesehen. Wenn die Maske ordnungsgemäß getragen wird, hilft es bei der Minimierung von ausgestoßenen Krankheitserregern und verringert für den Tragenden das Potential eines Kontakts mit Blut und Körperflüssigkeiten. Warnung: Diese Maske eliminiert nicht das Risiko eines Erwerbs von Krankheiten oder Infektionen. Bei Verunreinigungen mit Blut oder Körperflüssigkeiten umgehend austauschen. Diese Maske ist kein Atemschutzgerät.
- (FR) Usage prévu: Ce produit est destiné aux pratiques de contrôle des infections dans l'industrie des soins médicaux. Lorsqu'il est correctement porté, ce produit aidera à minimiser la contamination causée par les microorganismes expirés et réduira l'exposition potentielle de son porteur au sang et autres fluides corporels. Avertissement: Ce masque n'élimine pas le risque de contracter une maladie ou une infection. Remplacez immédiatement le masque s'il a été contaminé par du sang ou autres fluides corporels. Ce masque n'est pas un masque respiratoire.
- (ES) Uso deseado: Este producto está diseñado para prácticas de control de infecciones en la industria sanitaria. Cuando se usa apropiadamente, ayudará a minimizar la contaminación causada por microorganismos exhalados y reducirá la exposición potencial del portador a la sangre y fluidos corporales. Advertencia: Esta mascarilla no elimina el riesgo de contraer enfermedad o infección. Cambiar inmediatamente si se contamina con sangre o fluidos corporales. Esta máscara no es un respirador.
- (IT) Destinazione d'uso: Questo prodotto è destinato alle pratiche per il controllo delle infezioni nel settore sanitario. Se indossate correttamente, aiutano a ridurre la contaminazione causata dall'inhalazione di microorganismi e riduce l'esposizione potenziale a sangue e fluidi corporei. Attenzione: Questa maschera non elimina il rischio di contrarre malattia o infezioni. Cambiarla immediatamente se contaminata con sangue o fluidi corporei. Questa maschera non è un respiratore.
- (NL) Beoield gebruik: Dit product is bedoeld om infecties te vermijden in de gezondheidszorg. Als het correct wordt gedragen, helpt het de besmetting door uitgaande micro-organismen tot een minimum te beperken en vermindert het de mogelijke blootstelling van de draager aan bloed en lichaamsvloeistoffen. Waarschuwing: Dit masker is niet alle risico's op besmetting met een ziekte of infectie. Vervang het masker als het met bloed of lichaamsvocht in aanraking is gekomen. Dit masker is geen

Soft, Easy to Breathe, Full Width, Flexible

- Ⓔ Procedure Face Mask, Blue, EarLoops, Latex Free
- Ⓓ Verfahrens-Gesichtsmaske, Blau, Ohrschlaufe, Latexfrei
- Ⓕ Masque faciale Procédure Chirurgicale, Couleur Bleue, Boucles de Fixation aux Oreilles, Sans Latex
- Ⓔ Mascarilla de Procedimiento, Azul, Gancho, Sin Látex
- Ⓘ Mascherina per Procedure, Blu, Elastici Auricolari, Priva di Lattice
- Ⓐ Gezichtsmasker Voor Ingrepen, Blauw, Oorbandjes, Zonder Latex

Three Layers
Integrated Nose Bridge
Filtration Efficiency Exceeds 98%
Meets Type IIR Standards

Box of 50



**PROCEDURE FACE MASK
WITH EAR LOOPS**